



Filtek™

Bulk Fill
Flow materiale

Bulk fill flowmateriale som er nemt at applicere.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale appliceres nemt med en ergonomisk sprøjte. Den gør det nemmere at se og kontrollere, hvor materialet præcist placeres i dybe kaviteter.

Reducerer porøsiteter og spild

Stort set ingen porøsiteter eller materiale, der fortsætter med at løbe under applicering, hvilket giver dig bedre kontrol.

Slut med at gætte

Den grønne del af stemplet viser den resterende mængde materiale. Når sprøjten er tom ses kun den hvide stempedel.



Bøjbar kanylespids

For nemmere applicering kan spidsen let bøjes uden at knække.

Nem at holde og applicere

Trekantet fingerplade og stempel gør det hurtigt og nemt at placere sprøjten, som det passer for dig.



Fordele

- Fjerner stort set alle porøsiteter
- Bøjbar kanylespids gør applicering nemmere
- Ergonomisk sprøjte, der er nem at holde og applicere med
- Kan sprøjtes i kaviteten i lag på op til 4 mm
- Rigtig god adaptation og lavt polymerisationsstress

Sikkert at opvarme og kan anvendes til injection mold teknik.

Kan opvarmes op til 70 °C i samlet op til 1 time, op til 25 gange. CE mærket og godkendt af FDA.



Posterior fyldning



Tanden præpareres og adhæsiv appliceres fx 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesiv.



Applicer 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale i lag på op til 4 mm i den præparerede kavitet og lyspolymeriser fx med 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe.



Applicer et afsluttende lag på minimum 2 mm konventionel kompositmateriale fx 3M™ Filtek™ Universal Fyldningsmateriale.

Kliniske foto med tilladelse fra tandlæge Dr. Reich, Seefeld, Tyskland

Indikationer

(Kan appliceres i lag på op til 4 mm)



Base
(Klasse
I og II)



Liner
(Klasse
I og II)



Minimal invasiv
tandbehandling
(MID)



Klasse III



Klasse V



Reparation af
indirekte
restaureringer
(små defekter)



Reparation




Udfyldning af
underskæringer



Forsegling af pits
og fissurer



Opbygning

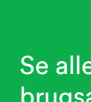

Se alle indikationer i
brugsanvisningen.

Bestillingsinformation



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale

Sprøjtefiler indeholder: 2 stk. sprøjter á 2 g, 20 appliceringsspidser.

FARVE	VARENR.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

VARENR.	PRODUKTINFORMATION
3740T	20 stk. grønne appliceringsspidser til 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale, 19 gauge



3M

3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
3MOralcare.dk@mmm.com

www.3M.dk/dental

3M, "3M Science. Applied to Life", Filtek, Scotchbond og Elipar er varemærker fra 3M. © 3M 2020. Alle rettigheder forbeholdes. 13432884-1DK20200504