

PA

Vejledning




Indhold

Oversigt	1
Ny PA status	2
Indtastning af værdier	4
Oversigt over registreringerne i PA.....	5
Journalfør.....	5
Ny Screening.....	6
Journalfør.....	7
Ny PA Kontrol.....	8
Sammenligning.....	10
Opsætning.....	12
Registreringstype	13
Målesteder	13
Registreringsrækkefølge.....	14
Første visning.....	14



Overzicht


I PA er det muligt at lave forskellige typer registrering, samt vise sammenligninger af to registreringer. Her følger gennemgang af hele modulet

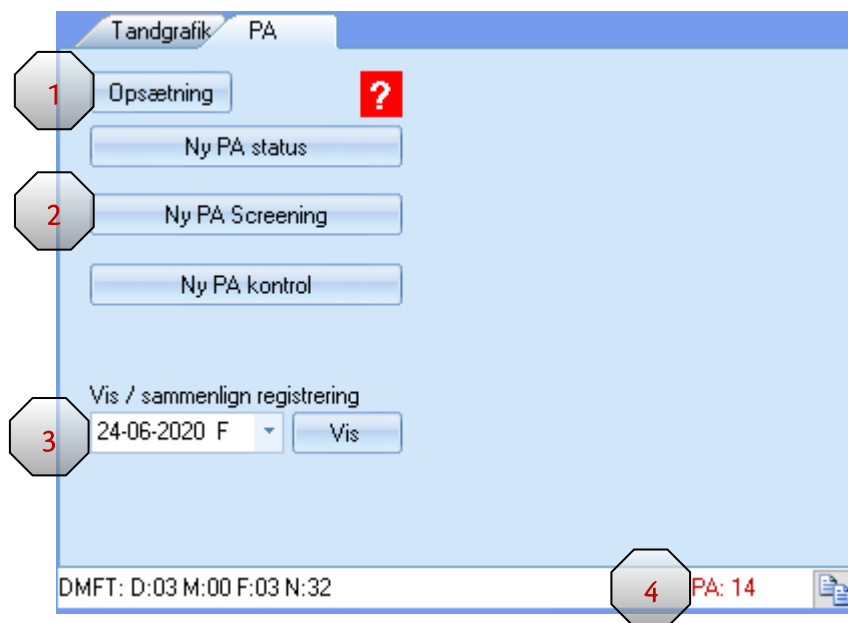


1. Opsætning af registreringsmetode. Se separat vejledning for gennemgang af denne.
2. Knapper til start af ny registrering. Ny PA status = Fuld status/PUD, Ny PA Screening = registrering af enkelte tænder, IKKE fuld status, Ny PA kontrol = kontrol af tidligere PA registrering.
3. Vis en registrering fra den angivne dato. Eller sammenlign to registreringer.
4. Indikation af hvor mange PA-registreringer, der ligger på den valgte patient.

Ny PA status

1. For at registrere en fuld PA status klik da på knappen "Ny PA status".

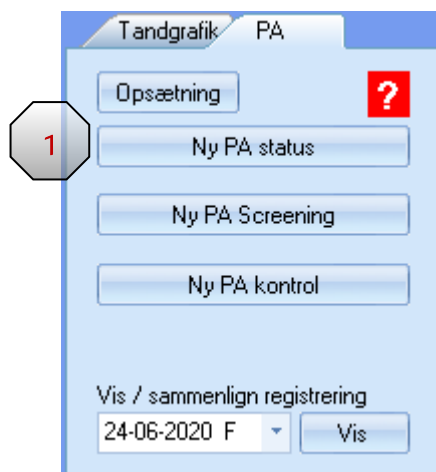

Nu vises en oversigt over opsætningen for "Ny PA status" for den aktuelle bruger. Denne kan justeres til den nuværende registrering, hvis registreringen ønskes anderledes end standardopsætningen.

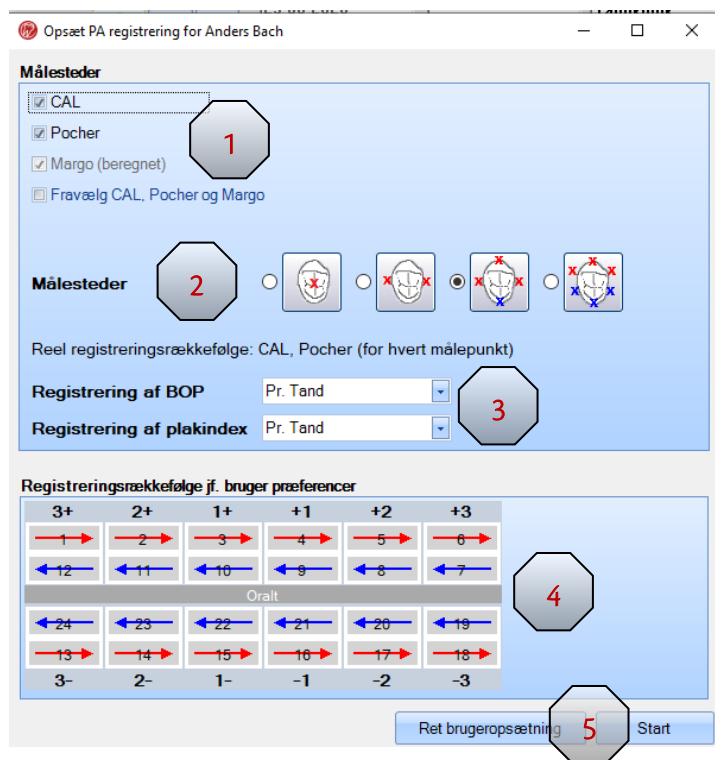

1. Valg af måletyper. Flueben kan flyttes som det ønskes og 3. mål beregnes ud fra de 2 andre. Fravalg af CAL, pocher og margo gør der kun registreres BOP. Under registrering kan der her vælges at tilføje data.
2. Valg af antal målesteder
3. registrering af BOP og plak.
4. Indikation af retning mm. på registrering
5. Knapper til at starte registrering eller til at gå til brugeropsætning.

NB! Vi anbefaler at I får oprettet opsætningen for den enkelte behandler, så man ikke skal tilrette opsætningen hver gang.

Ved klik på "Start" åbnes selve PA registreringen.

1. Øverst i højre hjørne, kan vælges hvilke målepunkter der vises i oversigten mens der registreres.
2. Her vises hele tandsættet. Den grå markerede tand indikerer hvilken tand der registreres på. Markeringen flytter sig automatisk fra tand til tand..
3. Detalje visning af den markerede tand, i dette tilfælde 8+. Den blålige markering angiver hvilket målepunkt der indtastes værdi på.
4. Genvejstaster til at registrere hver værdi som BOP, pus etc. Tal værdier indtastet via tal på tastatur.
5. Vælg her, hvis en tidligere registrering ønskes indlæst som base for aktuelle registrering.
6. Knapper til at journalføre eller til at lukke vinduet. Der er mulighed for at journalføre/gemme og forblive på aktuelle registrering. Klik da på knappen "Journalfør og vis"

Indtastning af værdier

Mens der registreres vil markering automatisk flytte sig og skifte tand, kæbe osv.

Alle talværdier indtastes via tal på tastaturet, ved værdier over 9 tages "+" og 2 for 12 og "+" 3 for 13 etc.

I dette eksempel har er der valgt at CAL og Pocher indtastes, og Margo beregnes fra de indtastede værdier.

	8+	7+	6+
C	2	1	9
P	2	1	11
M	2	1	-2
	5	3	
	4	2	
	5	3	
	-3	-2	
	-2	-1	
	-3	-2	
C			
P			
M			
Oralt			

"Genvejstasterne" nederst i højre side viser, hvad der ellers kan registreres og hvilken genvej, der skal benyttes.

Genvejstaster	
B	BOP (0 - 1)
U	Pus (0 - 1)
P	Plak (0 - 1)
F	Furk (0 - 3)
L	Løsning (0 - 3)
K	KPA (0 - 1)
V	Vandring (0 - 1)

B: Registrer blødning – gentagne tryk fjerner blødning igen

U: registrer pus - gentagne tryk fjerner pus igen

P: registrer plak - gentagne tryk fjerner plak igen

F: registrer furkatur

L: registrer løsning – Gentagne tryk hæver værdien frem til 3, hvis der herefter trykkes på L igen bliver værdien 0

K: registrer KPA - gentagne tryk fjerner KPA igen

V: registrer vandring - gentagne tryk fjerner Vandring igen

Det er muligt, igennem hele registrering at benytte musen for at gå tilbage, eller frem og rette / indtaste enkelt værdi. Først markeres tanden, herefter markeres det punkt / værdi der skal rettes og den nye værdi indtastes.

Specielt ved furkatur

		+8		
Furk		Facial Mesial	Facial	Facial Distal
<input checked="" type="radio"/>	CAL	2	CAL	2
<input type="radio"/>	Pocher	5	Pocher	5
<input type="radio"/>	Margo	-3	Margo	-3
<input type="radio"/>	BOP	0	BOP	0
<input type="radio"/>	Pus	0	Pus	0
<input type="radio"/>	Plak	0	Plak	0
Oral Mesial		Oral	Oral Distal	
<input type="radio"/>	CAL	2	CAL	2
<input type="radio"/>	Pocher	5	Pocher	5
<input type="radio"/>	Margo	-3	Margo	-3
Løsning	0			
KPA	0			
Vandring	0			

Når furkatur indtastes via genvejen "F" skifter markering til første lokation. Herefter benyttes tal 1, 2 og 3 for at vælge graden på furkatur.

Herefter markeres med den valgte grad, samt indikator skifter til næste punkt.

Første grad

Anden grad

Tredje grad

De runde felter indikerer rødder

Oversigt over registreringerne i PA


8+	7+	6+	5+	+5	+6	+7	+8
2 5 5 5 2 2 -3 3 3	5 5 5 2 2 2 3 3 3	9 2 2 11 5 2 -2 -3 2	5 2 2 5 5 5 -3 -3 -3	5 5 5 2 2 2 3 3 3	5 5 5 2 2 2 3 3 3	5 2 2 5 5 5 -3 -3 -3	2 2 2 5 5 5 -3 -3 -3
				K	V	L	F
							2 2 2 5 5 5 -3 -3 -3

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tand med blødning
2. Tand med pus
3. Tand med plak
4. Tand med blødning + pus + plak
5. Tand med KPA registreret
6. Tand med Vandring
7. Tand med løsning
8. Tand med furkaturer (for at se grad mm markeres tand så det kan aflæses i detaljen)


Journalfør

Når en registrering er fuldført, journalføres denne via knapperne nederst i højre hjørne

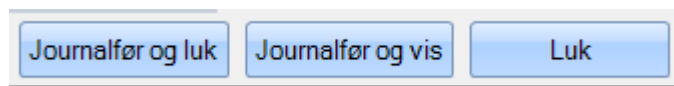

Journalfør og luk - Journalfører registreringen og lukker PA registrering.

Journalfør og vis – Journalfører og viser registreringen. Her har man mulighed for:

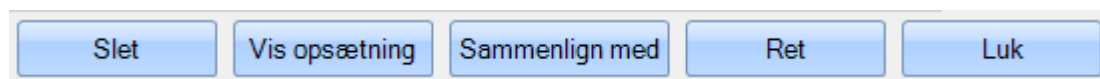

Slet – Sletter denne registrering helt fra patienten. Er kun muligt samme dag den er oprettet.

Vis opsætning – viser opsætning som denne registrering er lavet med.

Sammenlign med – justerer vinduet, så der nu kan sammenlignes med tidligere registrering.


Ret – gør vinduet aktivt igen, så der kan redigeres på værdier mm., herefter kan der igen journalføres med ændringerne.

Luk - Lukker vinduet.

Ny Screening

Screening er til at fortage en registrering på kun enkelte tænder.


Klik på knappen "Ny PA Screening", herefter vises opsætning som kan justeres og registrering kan startes via start knappen

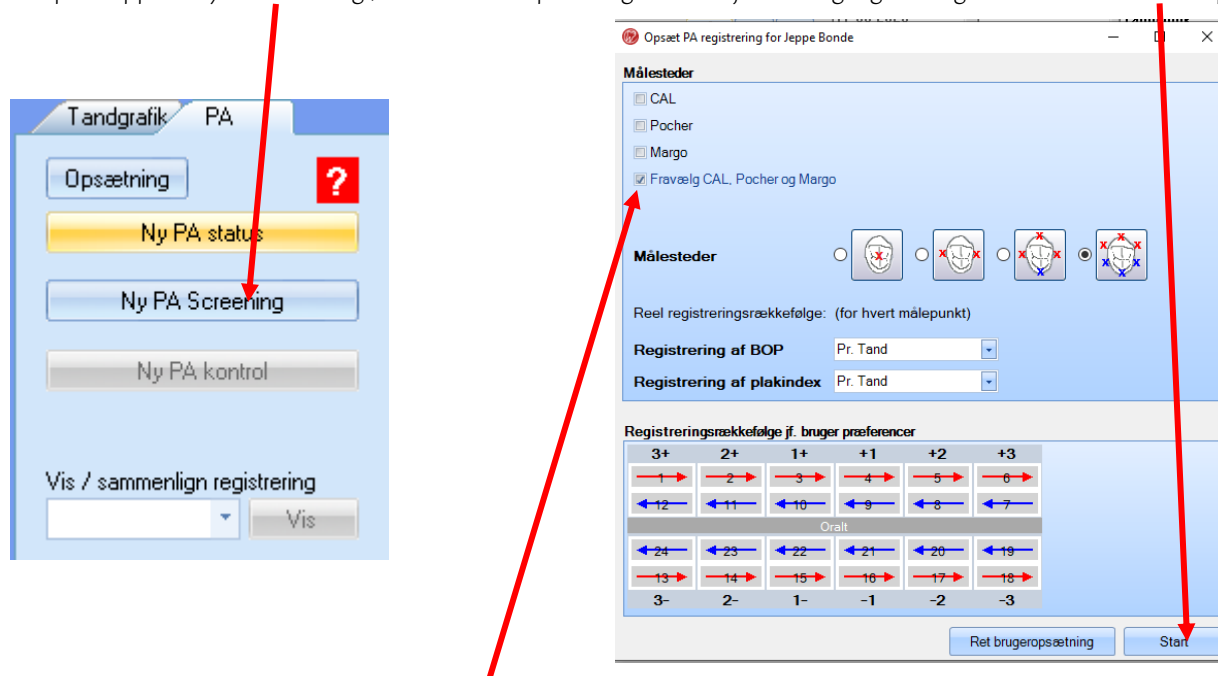

Bemærk, at der her på billedet er "fravalgt CAL, Pocher og Margo". Dette betyder vi som udgangspunkt kun registrere BOP og plak i dette eksempel, til at starte med.



Efter start åbnes PA vinduet. Modsat en fuld PA status er der her ikke valgt nogen tænder til registrering.

Dette gøres ved at dobbeltklikke på hver tand, der ønskes at registrere på

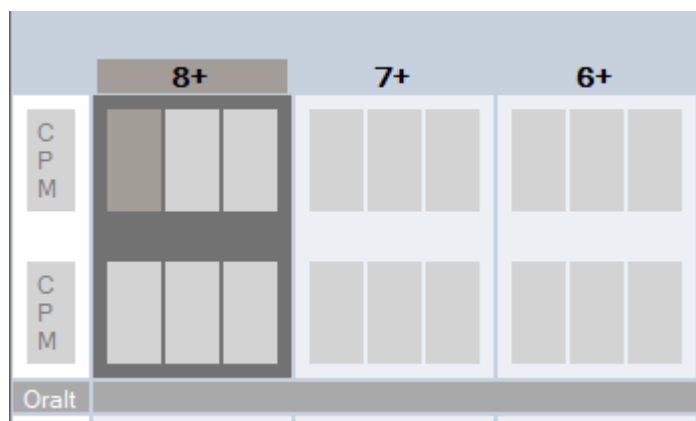

I dette billede er 8+ valgt til, mens 7+ og 6+ ikke er valgt. Tilvalgte tænder vises med en grå markering over tandbetegnelsen.

Når de ønskede tænder er tilvalgt, påbegyndes registrering af værdier som normalt. I dette tilfælde, hvor der er fravalgt Cal, Pocher og Margo kan der kun indtaste BOP og plak. Hvis der efter start ønskes at tilføje informationer, kan de tilvælges via knappen i bunden af vinduet.

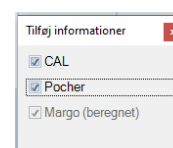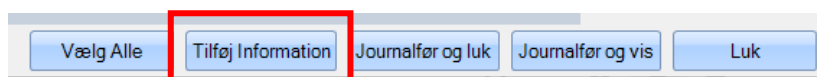


Det er også muligt, at tilvælge alle tænder til registrering, frem for at skulle dobbeltklikke på samtlige tænder.



Tænder kan vælges til og fra løbene som det ønskes blot ved dobbeltklik på tanden.


Journalfør

Når registrering er fuldført, journalføres denne via knapperne nederst i højre hjørne

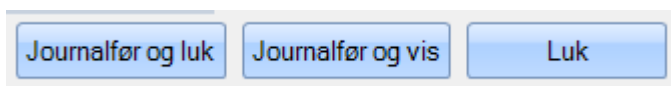

Journalfør og luk - Journalfører registreringen og lukker PA registrering.

Journalfør og vis – Journalfører og viser registreringen. Her har man mulighed for:

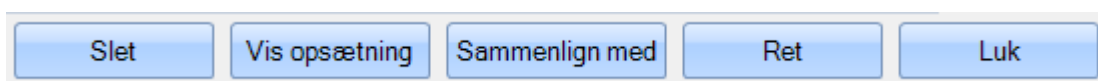

Slet – Sletter denne registrering helt fra patienten. Er kun muligt samme dag den er oprettet.


Vis opsætning – viser opsætning som denne registrering er lavet med.

Sammenlign med – justerer vinduet så der nu kan sammenlignes med tidligere registrering.

Ret – gør vinduet aktivt igen så der kan redigeres på værdier mm., herefter kan der igen journalføres med ændringerne.

Luk - Lukker vinduet.


OSB! Hvis der journalføres uden der er registreret fæstetab, vil følgende advarsel dukke op.

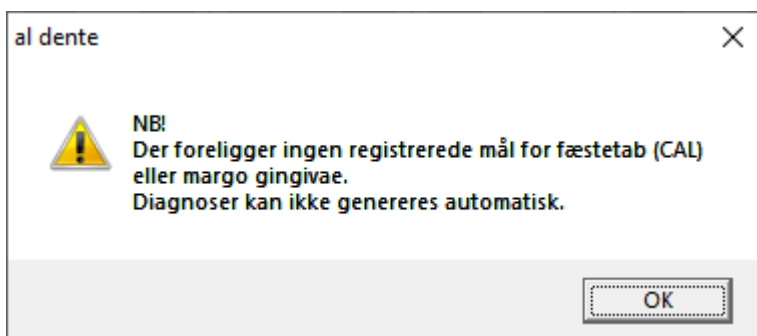


Ny PA Kontrol

Kontrol af en tidligere registrering.

Klik på knappen "Ny PA Kontrol", herefter vises opsætning, som kan justeres og registrering kan startes via knappen.

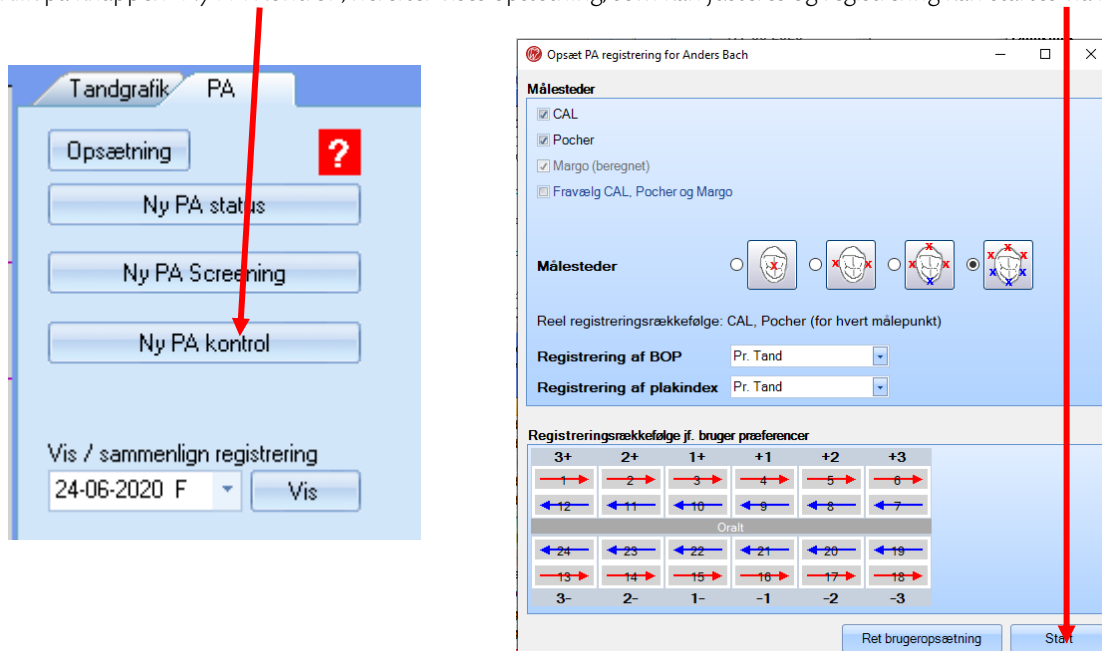


Tilvæg nu de tænder, der skal registreres på ved at dobbeltklikke på dem.

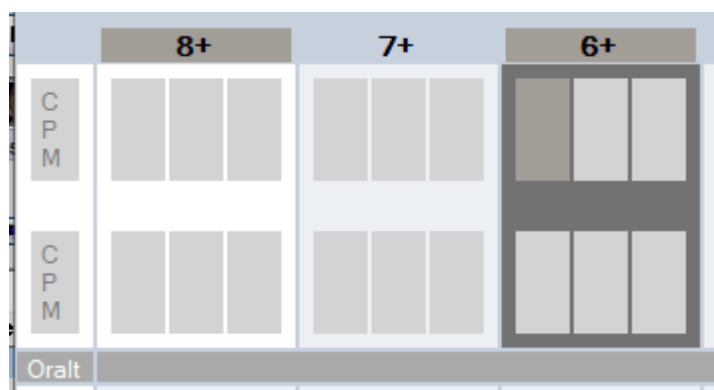

8+ og 6+ er her tilvalgt og 7+ er ikke tilvalgt.

Ønsker man at tage udgangspunkt i en tidligere registrering kan dette vælges nederst i højre side. Det kan også med fordel sættes op i opsætningen, at ved en kontrol er seneste registrering indlæst automatisk.

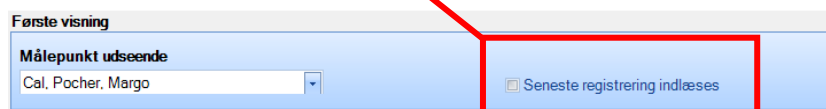

Tidligere indlæste værdier vises som grå i oversigten.

8+		
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6

Når nye værdier indtastet overskrives de tidligere grå tal med nye farvede afhængigt af tallets værdi. I detaljevisningen vises der to kolonner pr målepunkt når der indtastes ændringer. På denne måde er det tydeligt at se de gamle værdier mens der registreres nye.

8+		
2	2	6
5	5	6
-3	-3	6
6	6	6
6	6	6

8+		
Furk		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Løsning	0 0	
KPA	0 0	
Vandring	0 0	
Facial Distal	Facial	Facial Mesial
CAL 6 2	CAL 6 2	CAL 6 6
Pocher 6 5	Pocher 6 5	Pocher 6 6
Margo 0 -3	Margo 0 -3	Margo 0 0
	BOP 0 0	
	Pus 0 0	
	Plak 0 0	
Oral Distal	Oral	Oral Mesial
CAL 6 6	CAL 6 6	CAL 6 6
Pocher 6 6	Pocher 6 6	Pocher 6 6
Margo 0	Margo 0	Margo 0

Når registrering er færdig kan denne journalføres på normal vis.



Vær dog opmærksom på at hvis alt skal gemmes fra tidligere, og ikke kun de tænder med ændringer, så skal tænder være tilvalgt. Det er KUN de tilvalgte tænder der journalføres. Hvis alt ønskes gemt, kan der med fordel klikkes på "vælg alle" lige inden man journalfører.

Sammenligning


For at sammenligne to registreringer i PA klikkes først på "Vis knappen".

Nu vises registreringen fra den valgte dato.

Herefter klikkes på knappen "sammenlign med".

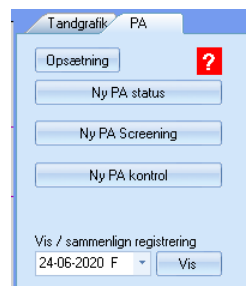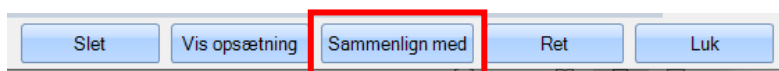


Nu vises den samme registrering to gange i vinduet.

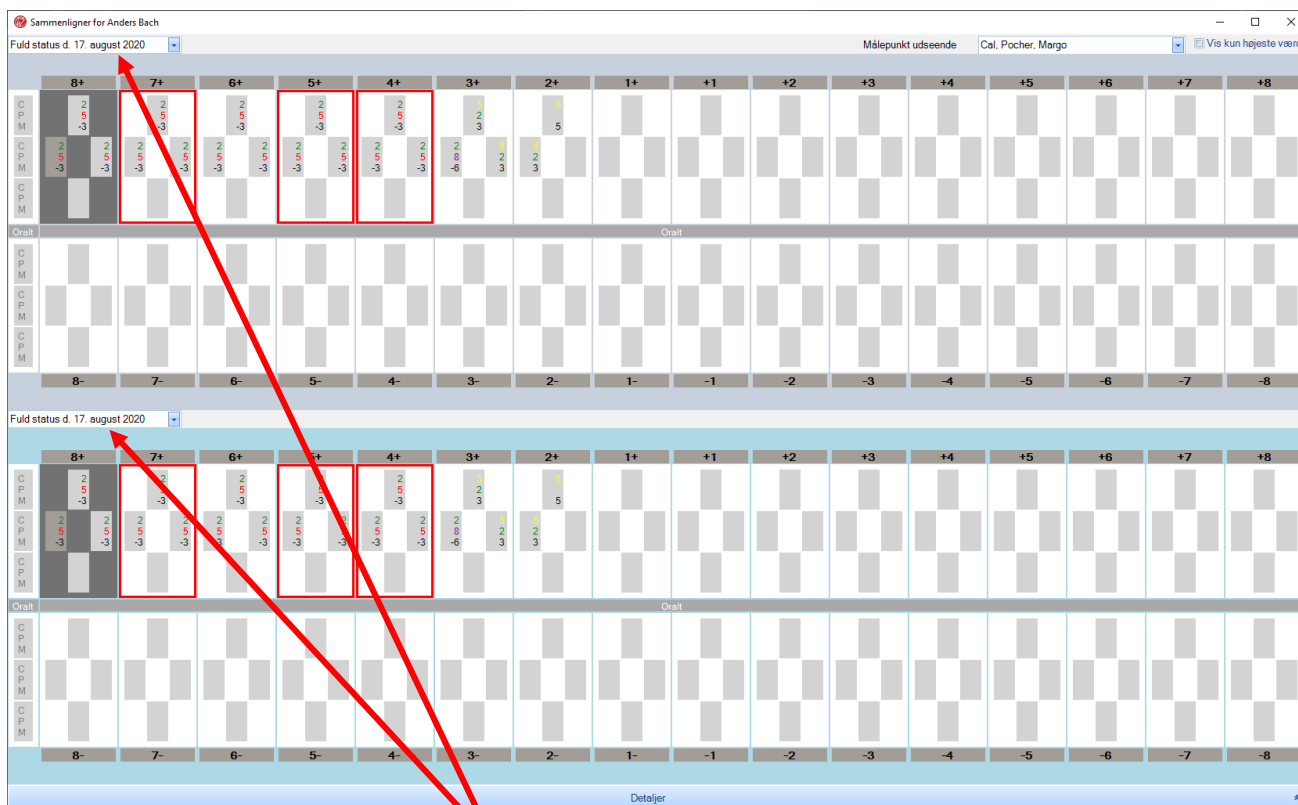

I feltet øverst i venstre hjørne på hver visning kan der vælges hvilke datoer der skal sammenlignes med.

Hvis der klikkes på "Detaljer" i bunden af vinduet, vises den valgte tand som detaljer visning.


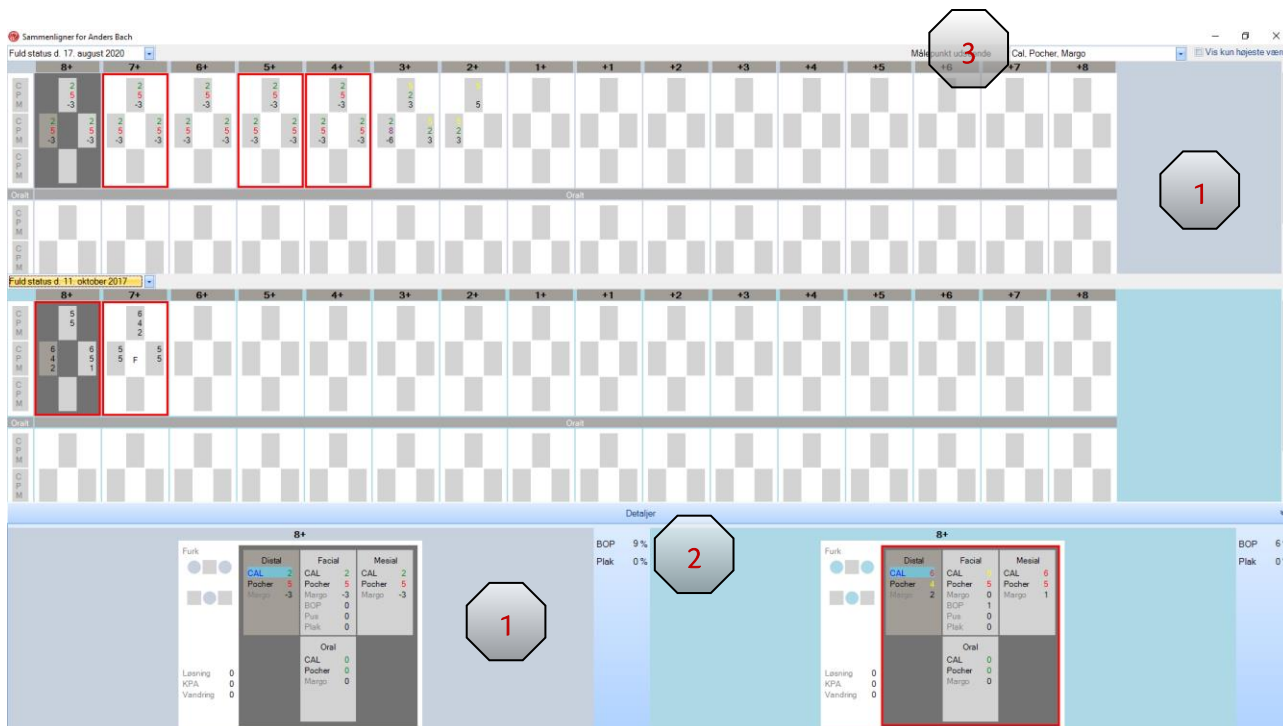


Her kan alle værdier på tanden ses ud fra de to valgte datoer. Baggrundsfarven indikerer hvilken detalje der hører til hvilken dato.

1. Baggrundsfarve sammenhæng.
2. BOP og plak på den tilhørende dato
3. Ændring på oversigtens udseende. Hvis poche dybde er mest interessant, kan dette vælges at sortere på her.

Opsætning


1. Opsætning tilgås ved først at vælge fanen "PA"
2. Herefter vælges knappen "Opsætning"
3. I toppen af vinduet kan man se, hvilken behandler opsætningen tilhører ud fra behandler initialer

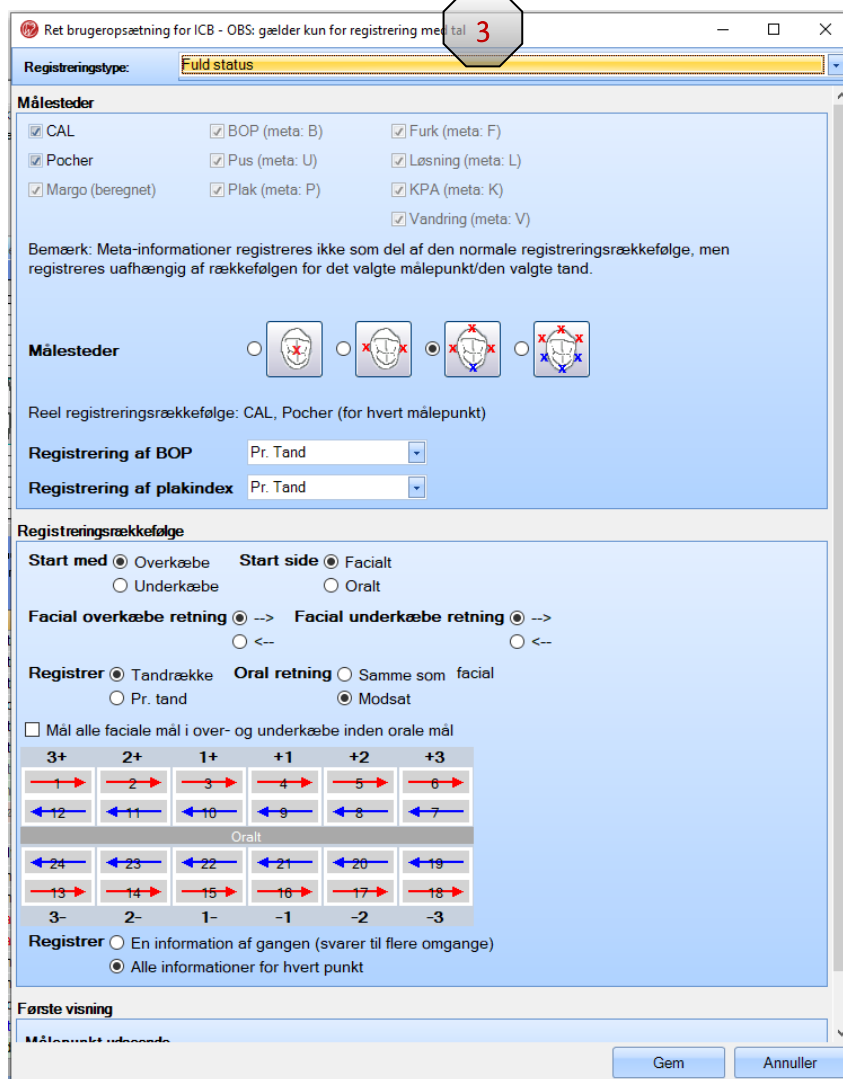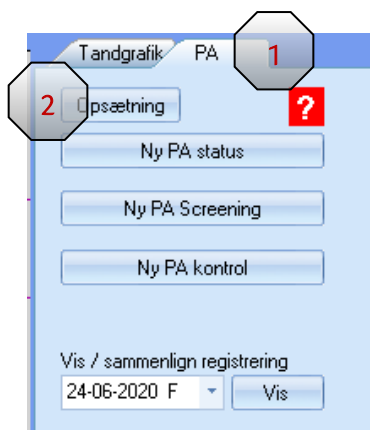


Registreringstype

Det er muligt at have forskellig opsætning på de 3 typer af registrering


Fuld status, Screening og Kontrol

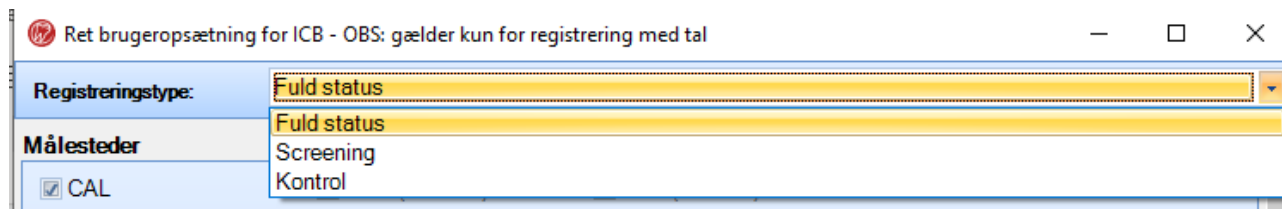

Målesteder

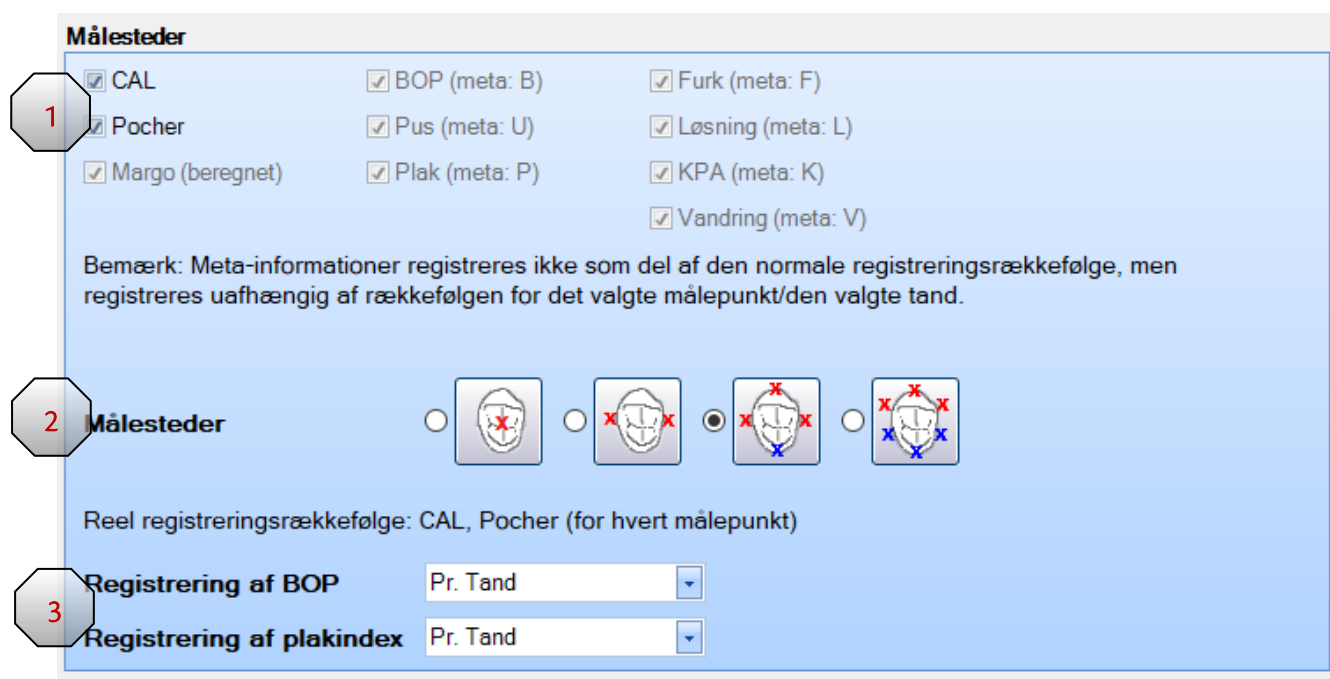

1. Valg af data type. Det er frit at vælge om der skal indtastes CAL, Pocher eller Margo. Flueben kan frit flyttes og de 3. data type beregnes ud fra de 2 andre.
2. Valg af målepunkter, 1, 2, 4 eller 6 målepunkter. Blå indikerer oral og Rød indikerer facial.
3. Valg af BOP og plak registrering. Der kan registreres BOP og plak pr. tand, Approksimalt, pr. målested og ingen.

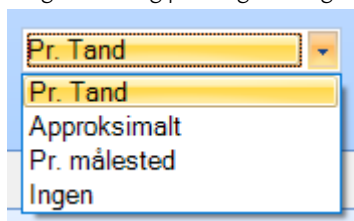

OBS! Hvis der ikke registreres BOP skal der vælges "ingen" i opsætning. Eller vil der dannes en journal linje hvor BOP vises som 0% som kan være misvisende

Registreringsrækkefølge

Registreringsrækkefølge

1 Start med Overkæbe Underkæbe Start side Facialt Oralt

2 Facial overkæbe retning --> <-- Facial underkæbe retning --> <--

3 Registrer Tandrække Pr. tand Oral retning Samme som facial Modsat

4 Mål alle faciale mål i over- og underkæbe inden orale mål

3+	2+	1+	+1	+2	+3
1 →	2 →	3 →	4 →	5 →	6 →
← 12	← 11	← 10	← 9	← 8	← 7
Oralt					
← 24	← 23	← 22	← 21	← 20	← 19
13 →	14 →	15 →	16 →	17 →	18 →
3-	2-	1-	-1	-2	-3

5

6 Registrer En information af gangen (svarer til flere omgange) Alle informationer for hvert punkt

1. Start på rækkefølgen
2. Retning på registrering i over og underkæbe
3. Her vælges om der skal registreres i hele tandrækken eller rundt om tand. Der kan vælges om oral skal være modsat retning
4. Flueben her betyder der registreres alle faciale mål før der begynder på de orale
5. Oversigt over rækkefølgen. Denne skifter hver gang der justeres på f.eks. start og retning
6. Her vælges om der skal registreres en information af gangen eller alle informationer pr punkt. En information af gangen svarer til flere omgange. Dvs. Alle CAL-værdier og så forfra med Pocher

Første visning

Første visning

1 Målepunkt udseende
Cal, Pocher, Margo

2 Seneste registrering indlæses

1. Målepunkt udseende indikerer hvilke mål der er synlige under registrering, når man ser i oversigten. Dette kan ændres mens man registrerer hvis det ønskes.
2. Valg om senest registrering skal indlæses automatisk. Ved f.eks. en kontrol af tidligere PUD er dette særligt brugbart.